

## USB ドライバー インストール ガイド

### システム要求事項

オペレーティング・システム : Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional または Ultimate SP1  
Microsoft Windows 8.1 Standard または Professional  
Microsoft Windows 10 Home or Pro

周辺機器 : USB、CD/DVD ROM  
ユーザーアカウント : 管理者（アドミニストレータ）権限


### インストール手順

注釈:

1. e-DPP 4.5.0 は以前のバージョンとは共存出来ません。e-DPP 4.5.0 (e-DPP とライセンスドライバ/コンポーネント) をインストールする前に以前のバージョンの e-DPP (e-DPP とライセンスドライバ/コンポーネント) をアンインストールする必要があります。詳しくは本編の”アンインストール”のセクションを参照願います。
2. 次の操作を行う前にユーザーアカウント制御はオフにする必要があります:

#### Windows 7 と 8.1 の場合

- i. コントロールパネルを開きます。
- ii. コントロールパネルのカテゴリ “ユーザーアカウントと家族のための安全設定 → ユーザーアカウントの設定 → ユーザーアカウント制御設定の変更” を開きます。
- iii. “ユーザーアカウント制御設定の変更” の画面で、“通知しない” オプション (一番下) を選択し “OK” ボタンをクリックします。
- iv. コンピューターを再起動します。

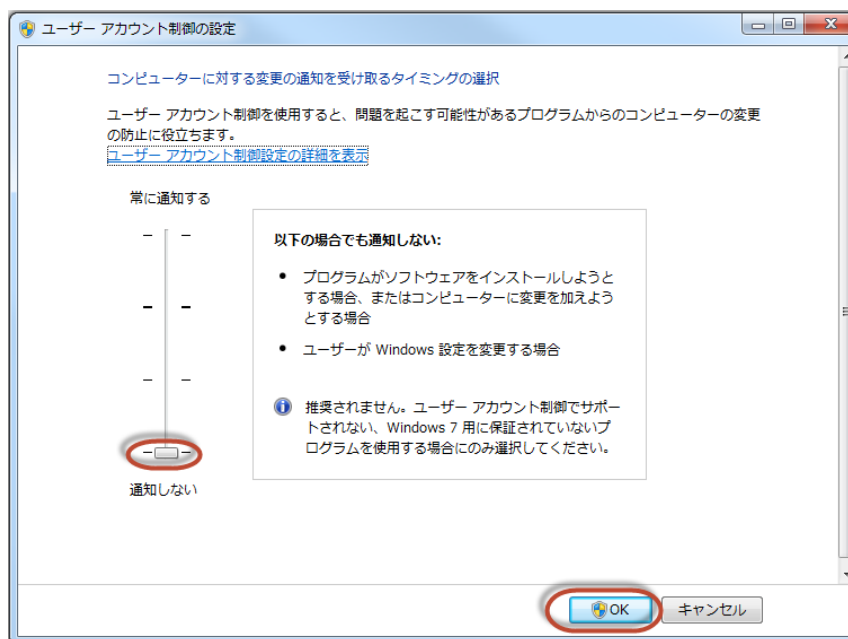

#### Windows 10 の場合

- i. コントロールパネルを開きます。
- ii. コントロールパネルのカテゴリ “ユーザーアカウント → ユーザーアカウント → ユー

## USB ドライバー インストール ガイド

ザーアカウント制御設定の変更”を開きます。“ユーザーアカウント制御設定の変更”の画面で、“通知しない”オプション(一番下)を選択し“OK”ボタンをクリックします。

iii. コンピューターを再起動します。

- 1) "日本語 e-DPP 4.5.0 インストール CD"を CD/DVD ドライブに挿入します。インストーラプログラムが自動起動します。

注：インストーラプログラムが自動起動しない場合は、エクスプローラで CD を開いて "eDPPInstaller.exe" を探してダブルクリックしてください。

- 2) "e-DPP インストールメニュー" のメイン画面で "ライセンスマネージャ" をクリックします。




- 3) "ワイブキーセットアップ" 画面で "次へ" ボタンをクリックします。


- 4) 次の画面が現れます。

- a. 必要に応じて追加の言語を選択します。(通常では日本語を追加選択)
- b. "次へ" ボタンをクリックします。

## USB ドライバー インストール ガイド

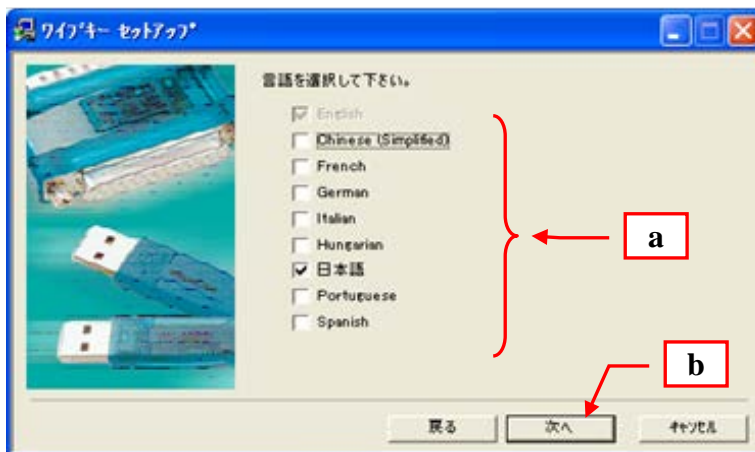


5) “次へ” ボタンをクリックして続行します。

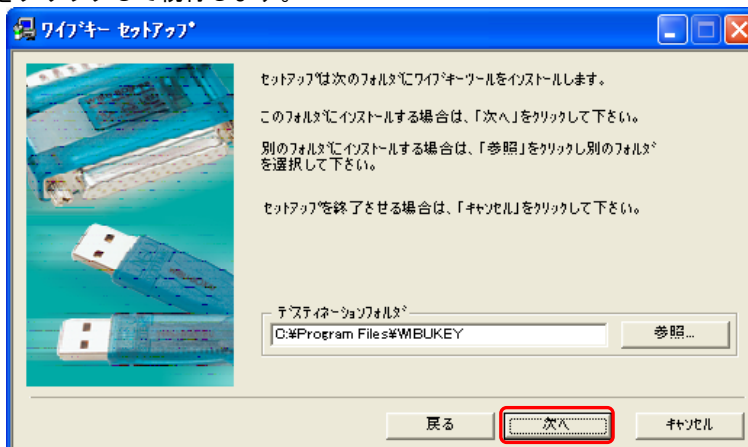

6) 新規フォルダを作成する確認画面が現れたら “はい” ボタンをクリックします。


7) 続く次の画面では次の様にしてください：

- a. 全てのオプションを解除（チェックしない）
- b. “次へ” ボタンをクリックして続行

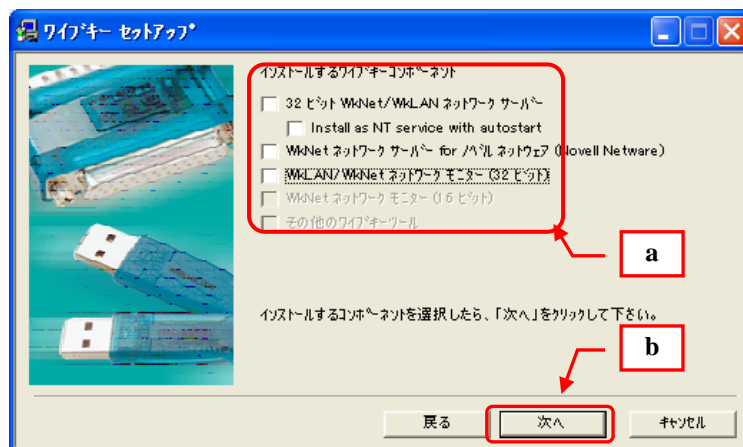


8) “次へ” ボタンをクリックしてコンポーネントをインストールします。


USB ドライバー インストール ガイド

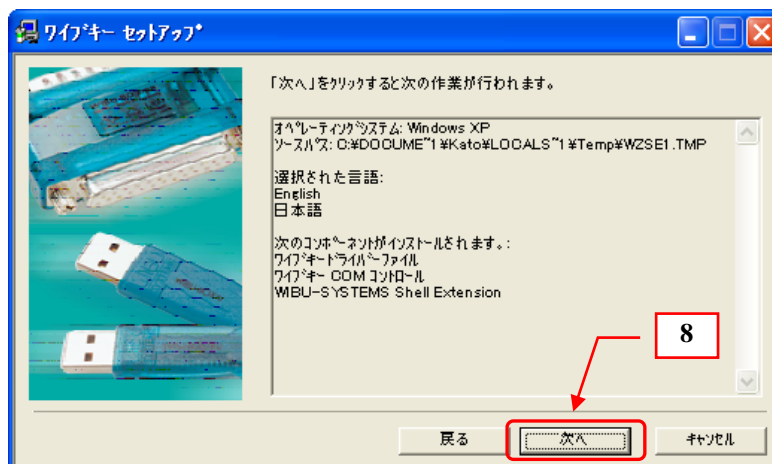

9) “次へ” ボタンをクリックして続行します。

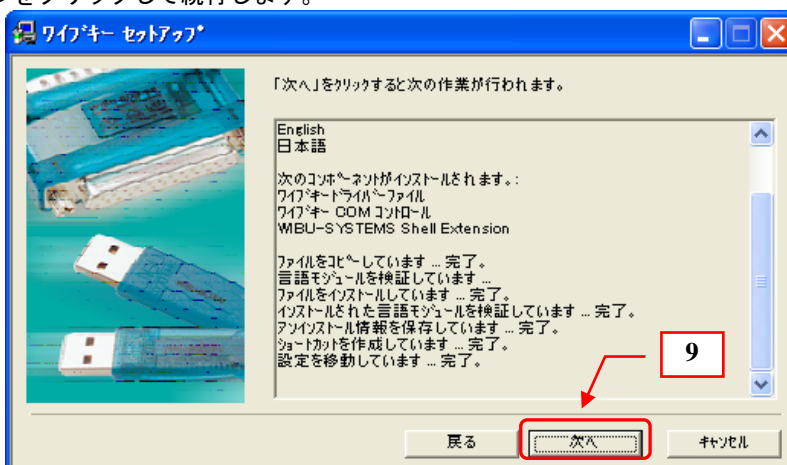

10) “終了” ボタンをクリックします。

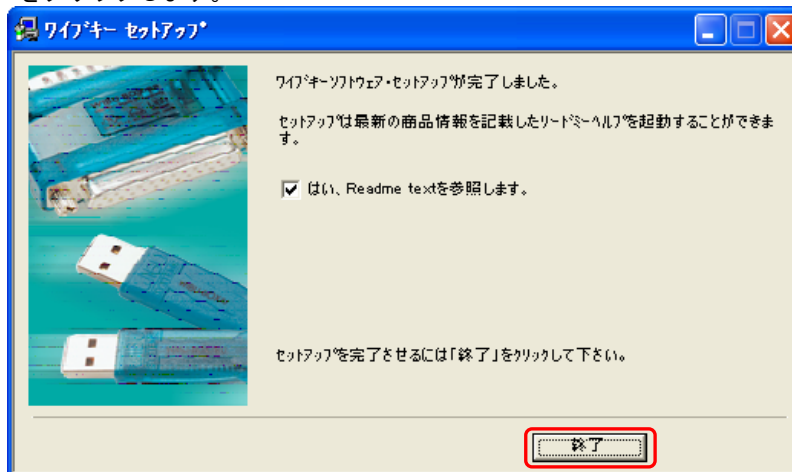

11) インストールが成功した事を確認するメッセージボックスが現れたら “OK” ボタンをクリックします。

12) USB ライセンス キーを差し込んでください。通常、Windows が自動的に USB ドライバーを検索します。日本語 e-DPP 4.5.0 プログラムを実行してください。

## ドライバーのアンインストール (ハードウェアライセンスキー)

(1) 「スタート」 → 「コントロールパネル」 を選択します。

(2) 「プログラムの追加と削除」 をダブルクリックします。


注：Windows Vista の場合、「プログラムと機能」アイコンをダブルクリックします。

(3) 現在インストールされているプログラムのリストから "WIBU-KEY Setup (WIBU-KEY Remove)" を選択します。


(4) "変更/削除" ボタンをクリックします。

注：Windows Vista の場合は "アンインストール" ボタンをクリックします。

(5) "ワイブキーセットアップ (アンインストール)" 画面の "次へ" をクリックします。

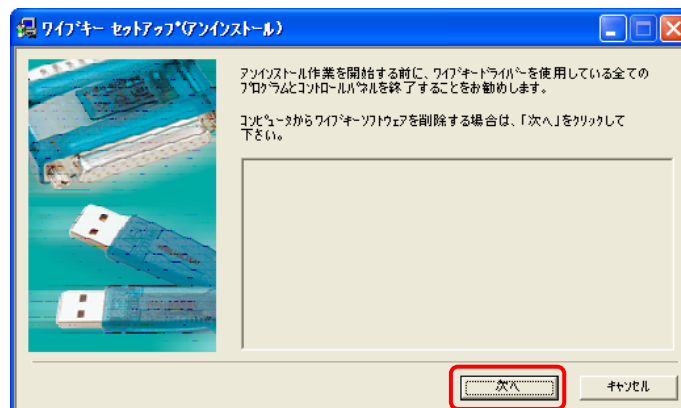

注："ロックされたファイル" 画面が現れたら、"セットアップを中止" を選択して "OK" をクリックします。そして、アンインストールを続行する前にコンピュータを再起動します。再起動後、ステップ 1 へ進みます。

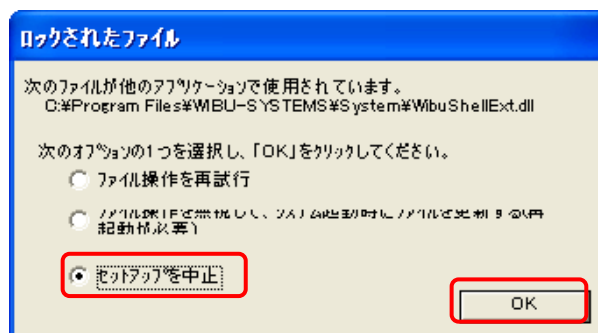

(6) "完了" ボタンをクリックして、アンインストールが成功したことを確認します。

## USB ドライバー インストール ガイド

